


БАНИ ВОДЯНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ



UT-4334_1



UT-4334_2

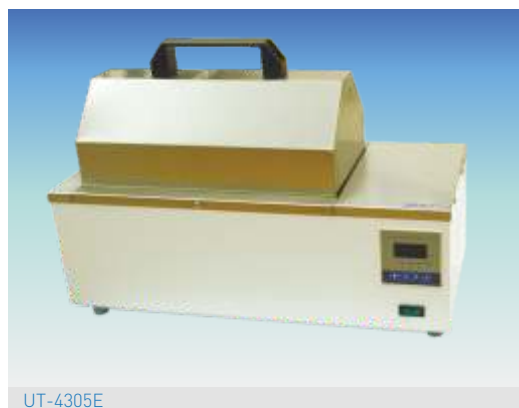

UT-4305E

Модель	UT-4334	UT-4305E	UT-4313E
Количество мест	1 или 6	1 или 2	1 или 4
Объем максимальный, л	36	6,5	12
Материал корпуса	сталь, покрашенная порошковой краской		
Материал ванны	нержавеющая сталь		
Материал крышки	нержавеющая сталь		
Материал ручки	полипропилен		
Внешние размеры бани без крышки (ДхШхВ), мм	770x345x260/340 с крышкой	520x220x175/350 с крышкой	490x375x155
Внутренние размеры бани (ДхШхВ), мм	600x300x200	325x170x120	330x325x120
Полезная глубина, мм	160	90	
Нагрев, °С	комн. +10...+100	комн. +10...+99,9	
Точность установки заданной температуры, °С	0,1		
Точность поддержания, °С	±1,0		
Слив теплоносителя	шланг с фиксатором		
Контроллер	цифровой		
Таймер	999 мин		
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	860x420x380	560x330x250 400x300x200	560x480x250 400x300x200
Вид упаковки	коробка гофрокартон, 1 место	коробка гофрокартон, 2 места	
Вес, кг	16,1	5	6,5
Мощность, Вт	2 000	600	800
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термостатирования проб.

Достоинства моделей:

- Цифровой контроллер.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Две крышки полностью съемных для UT-4305E и UT-4313E.
- Съемная 6-ти местная крышка для UT-4334.
- Съемный штатив для пробирок для UT-4334.