

**ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ**

Модель	UT-4620	UT-4610	UT-4686	UT-4603	UT-4623	UT-4663
Объем камеры, л	30	64	85	123	225	627
Нагрев, °С	до 300					
Конвекция	принудительная, регулируемая, отключаемая				принудительная	
Дискретность установки температуры, °С	0,1					
Дискретность установки времени таймера, мин	1					
Неравномерность температуры по объему, °С	±1					
Таймер	99 часов 59 мин					
Контроллер	цифровой с LCD дисплеем					
Материал камеры	нержавеющая сталь					
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской					
Материал полок	нержавеющая сталь					
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7	2/8	2/8	2/11	2/12	2/7
Совокупная нагрузка, кг	15			25		
Размеры камеры, (ДхШхВ), см	31x31x31	40x36x45	42x45x45	50x45x55	60x50x75	66x76x122
Внешние размеры (ДхШхВ), см	46x51x70	55x55x84	60x60x84	64x66x92	73x67x122	90x93x183
Вес, кг	33	44	55	60	94	110
Мощность, кВт	0,8	1,6	1,8	2,3	3	5
Электропитание	220 В; 50-60 Гц					380 В



UT-4620



UT-4623

Предназначены для высушивания, кондиционирования, легкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

**Достоинства моделей:**

- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечеткой логике (FuzzyLogic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
- Регулируемая скорость вращения вентилятора.
- Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.


**Аксессуары и принадлежности:**



Дополнительные полки из нержавеющей стали



9-2  
Эксикаторы

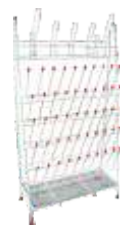

3-650-50  
Сушилка для посуды, 55 мест



UT-4620 рабочая камера