

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Модель	UF-1007	UF-1207	UF-1605	UF-1613
Температурный режим, °С	до 1000	до 1200	До 1600	
Точность поддержания, °С	±5			
Внутренние размеры (Д x Ш x В), мм	300x200x120		150x300x120	200x400x160
Внешние размеры (Д x Ш x В), мм	590x460x680			
Мощность, кВт	4,0	5,0	8	12
Объем, л	7,2	7,2	5,4	12,8
Скорость нагрева, °С/час	400-500 (в диапазоне от 100 до 800 °С)			
Внешнее покрытие	Сталь, покрытая порошковой краской			
Рабочая камера	Керамика с закрытыми нагревателями			
Теплоизоляция	Керамическое волокно			
Контроллер	Цифровой PID контроллер			
Таймер	1-9999 мин			
Электропитание	220 В, 50/60 Гц,		380В	

Предназначены для озоления проб спекания, быстрого высушивания образцов, нагрева, закалки, обжига различных материалов в воздушной среде и прочих высокотемпературных операций.

Достоинства моделей:

- Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями, размещенными с четырех сторон камеры для обеспечения быстрого и равномерного нагрева.
- Микропроцессорный терморегулятор для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±5 °С.
- Удобно расположенная панель управления и яркий светодиодный дисплей для одновременного отображения заданной и текущей температуры, а также служебных параметров.
- Простота управления и контроля.
- Светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты.
- Сигнализация при выходе текущей температуры за границы допустимого диапазона.

Аксессуары и принадлежности:



Щипцы тигельные




9-2
Эксихаторы




9-3-150
Спиртовка с колпачком, 150 мл



UF-1207

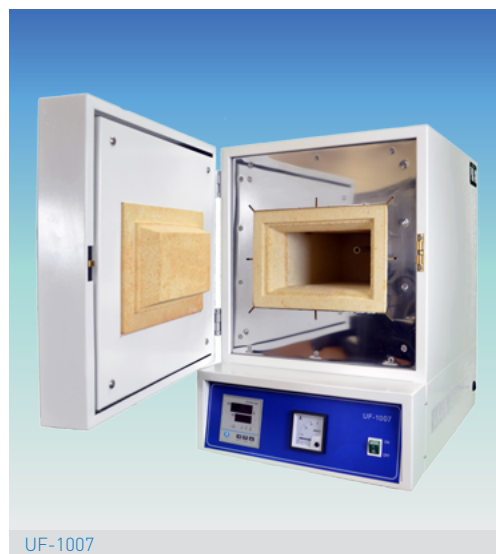

UF-1007

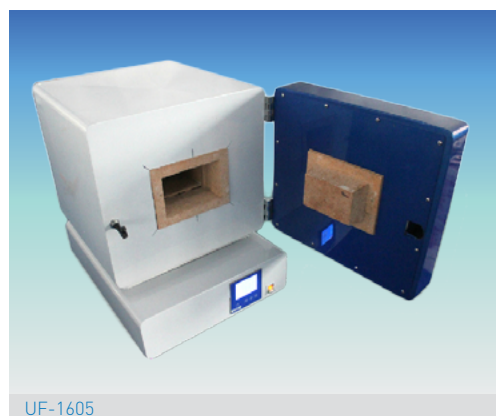

UF-1605