



СЕРИЯ НТ

Аналитические весы на
датчике Tuning-Fork

Функции:

- Счетный режим
- Процентное взвешивание
- Измерение плотности
- Статистическая функция
- Поддержка протоколов GLP\GMP
- Возможность взвешивания под весами



ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Выбирайте лучшее - новая концепция аналитических весов



Лабораторные
исследования



Фармацевтика и
биотехнологии



Медицина



Оборонно-промышленный
комплекс



Машиностроение
и микроэлектроника



Химия
и нефтехимия

Модель	HT 84RCE	HT 124RCE	HT 224RCE	HT 84CE	HT 124CE	HT 224CE
Max, г	80	120	220	80	120	220
Min, г			0,01			
Дискретность, г			0,0001			
Класс точности			Специальный (I)			
Дисплей			Жидкокристаллический с подсветкой			
Размер платформы, мм			Ø 80			
Калибровка	Внутренняя			Внешняя		
Интерфейс			RS232C			
Габариты, мм			290x200x306			
Вес, кг			≈2,9			

Преимущества технологии Tuning-Fork



Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии HT дает пользователю уникальные преимущества:


- Быстрое начало работы - вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Минимальное количество отказов и поломок - в 3 раза меньше, чем у ведущих производителей весов;
- Независимость показаний от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузкам (в 15 раз).

Функция Easy RES




Стабильность и скорость ответа должны быть корректными в зависимости от характера измеряемого объекта и окружающих условий. Функция Easy RES позволяет пользователю менять скорость ответа простым нажатием кнопки SET. Настройка скорости отклика под Ваш образец и условия.

Легкая чистка простая конструкция

Такие вещества как порошок и жидкости часто остаются на поверхности весов и ветрозащиты. Простота конструкции весов ViBRA серии HT позволит Вам легко разобрать весы для чистки и снова собрать. Это упрощает повседневные операции и повышает эффективность.

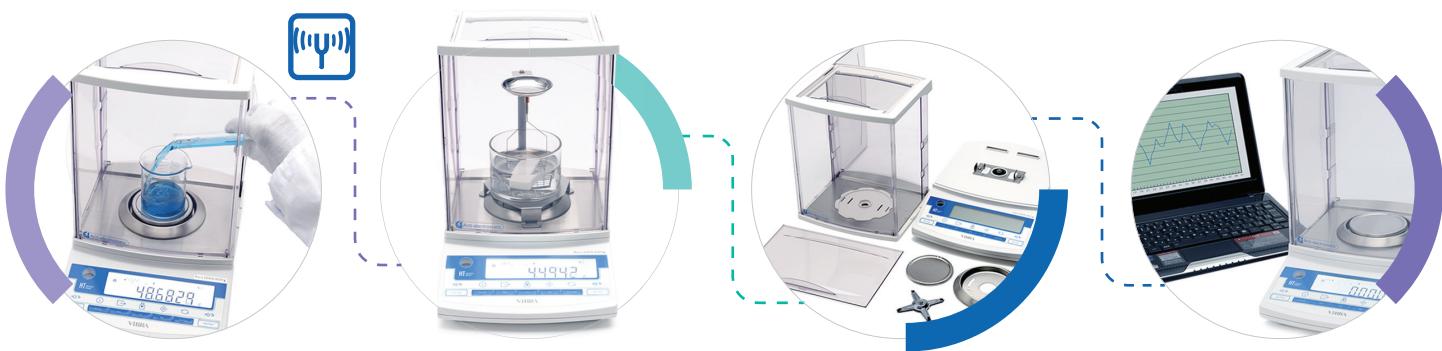

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

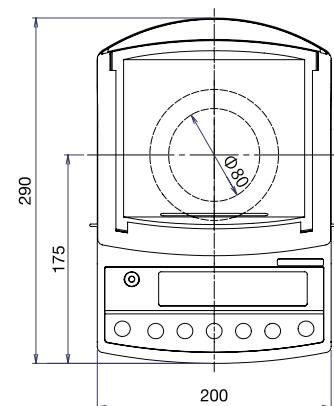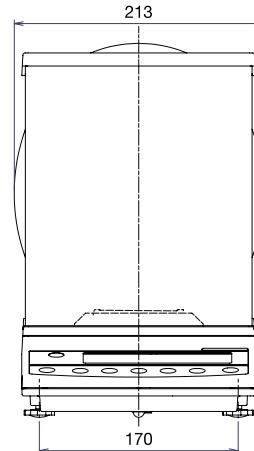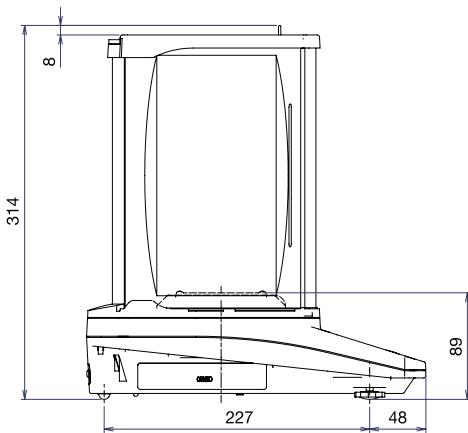

ОПЦИИ

HTDK комплект для измерения плотности

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

CSP-160 II - Микропринтер

CBM-910 II - Стандартный принтер

SDI/SDR - Дополнительные дисплеи

LAS-05D-SD - Ионизатор

COM-USB - Переходник

Кабель для подключения к компьютеру

Измерение плотности

Определение плотности становится легким благодаря комплекту для измерения плотности (поставляется дополнительно). Комплект для измерения плотности подходит для работы с твердыми, жидкими, пористыми и вязкими веществами. Измерение плотности с весами ViBRA серии HT стало стандартной процедурой в ежедневной работе.

Se-CAL

Функция "Se-CAL" сообщает о необходимости проведения калибровки через заданный интервал времени или при температурных изменениях. Это гарантирует постоянное соответствие стандартам эксплуатации для получения высокоточных результатов измерения.

Подключение внешних устройств

Весы ViBRA серии HT оснащены интерфейсом RS232C в стандартной комплектации с возможностью подключения к принтеру, ПК и другим устройствам. Вы можете сохранить результаты измерений как в печатной, так и в цифровой форме.

КОНТАКТЫ

ООО ВИБРА РУС

Официальный представитель

Shinko Denshi Co., Ltd. в России

г. Москва, 115114, Павелецкая

набережная, д. 2, стр. 3

Тел: + 7 495 740 68 71

Email: sales@vibra.ru

Http://www.vibra.ru