

ЛАКТОФАН2

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКТОФАН2

- портативный и легкий
- простой в обслуживании
- удобный цветной сенсорный дисплей
- дружелюбный интерфейс с наглядными символами
- возможность параллельного обследования до 6 человек
- удобная система пробоотбора для детей грудного возраста

Входит в клинические рекомендации
Министерства здравоохранения РФ
диагностики СИБР взрослых (2023 г.)

ЛАКТОФАН2

(Регистрационное удостоверение
№ФСР 2011/10258 от 25.05.2018)



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
основана в 1997 году в Санкт-Петербурге.

ООО «АМА» — компания-разработчик медицинских тест-систем и диагностического оборудования в России, получившая сертификаты соответствия стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016 в области «Разработки, производства и поставки комплексных тест-систем и средств для in vivo и in vitro диагностики».

Тест-системы и диагностическое оборудование предназначены для экспресс-диагностики, отличаются простотой исполнения, высокой точностью и невысокой ценой.


Данные преимущества позволяют использовать продукцию компании в практике врачей и среднего медицинского персонала в различных ЛПУ и МЦ с максимальной результативностью и комфортом прямо в кабинете врача.

ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., д. 4-6, лит. Е, пом. 1Н
Тел: 8 (812) 380-7699, 8 (812) 321-7501
E-mail: info@amamed.ru; www.amamed.ru



Ассоциация Медицины и Аналитики
ISO 13485:2016

Входит в клинические рекомендации
Министерства здравоохранения РФ
диагностики СИБР взрослых (2023 г.)

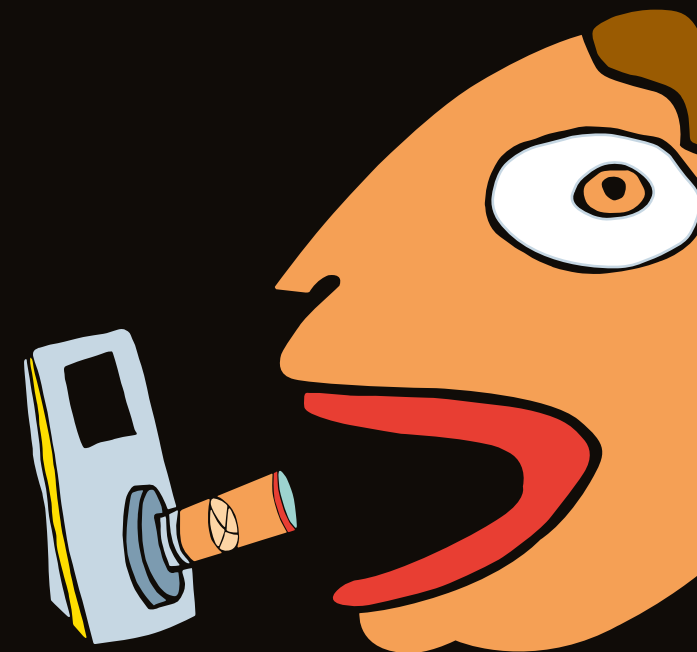

ЛАКТОФАН₂

анализатор
выдыхаемого
водорода



ЛАКТОФАН₂



Анализатор выдыхаемого водорода ЛАКТОФАН₂ предназначен для диагностики ряда заболеваний организма путем измерения уровня водорода в выдыхаемом воздухе.

Анализатор может быть применен в практике КДЛ, педиатров, гастроэнтерологов, аллергологов, терапевтов, семейных врачей, как для первичного обследования, так и для динамического наблюдения и контроля эффективности терапии.

ЛАКТОФАН₂ может быть использован для диагностики:



- Нарушения переваривания углеводов (лактазная недостаточность, сахарозо-изомальтазная недостаточность)
- Нарушения всасывания углеводов (мальабсорбция фруктозы, мальабсорбция глюкозы-галактозы)
- Синдрома избыточного бактериального роста (СИБР)

Используя различные нагрузки (растворы пищевых углеводов в воде), можно по изменению уровня водорода до и после нагрузки судить о причинах заболеваний.

Для получения достоверных данных пациент должен быть готов к обследованию, поэтому необходимо соблюдать требования, согласно указаниям врача.

КАК ПРОВОДИТСЯ ВОДОРОДНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ С ЛАКТОФАН₂

Подготовка к процедуре тестирования



Взвесить пациента



Выбрать нагрузку



Взвесить нагрузку



Приготовить раствор

Проведение тестирования



Определяем исходный уровень водорода в воздухе, выдыхаемом пациентом



Пациент выпивает нагрузку



Повторно измеряем уровень водорода в выдыхаемом воздухе через 30 мин.



Повторяем измерения каждые 30 мин в течении 2х часов. Оценить результат

Общее время обследования составляет 1-2 часа, последнее измерение проводят не позднее 2 часов после приема нагрузки.

Положительным результатом обследования следует считать прирост уровня водорода на 20 ppm и выше для взрослых и 10 ppm для детей грудного возраста.